



Sommario

DEFINIZIONE DEL PRODOTTO	3
CONFIGURAZIONE APPLICATIVO	5
Impostazioni	5
Menu [Campionamenti Web]→[Impostazioni]	5
[Campionamenti Web]→[Impostazioni Campionamenti Web]	6
Numeratore Verbale	14
Creazione Campionatori Web	16
Invio Credenziali di Accesso al Campionatore.....	17
ESPORTAZIONE CONTRATTI.....	18
Esportazione contratti	18
Cancellazione Contratti e Campionamenti sul Web.....	20
GESTIONE BARCODE	21
Numeratore Barcode	21
[Campionamenti Web]→[Numeratore Barcode]	21
Barcode per campionamenti Web.....	21
Generazione Barcode.....	22

Tipi di Utilizzo Barcode	23
Barcode non pre-assegnati.....	23
Barcode Manuali.....	25
Barcode pre-assegnati	26
Esportazione Barcode sul Web	28
IMPORTAZIONE CAMPIONAMENTI	28
APP WEB	33
Download APP.....	33
UTILIZZO DELLA WEBAPP CAMPIONAMENTI WEB	36
FUNZIONALITÀ PAGINA CAMPIONAMENTI WEB	40
Menu Principale	40
Campionamenti Confermati [Tipo (vc_tipo) = P stato=00]	40
Campionamenti da Contratto [Tipo (vc_tipo) = C, stato sempre 00	41
Verbali di Campionamento compilati [Tipo(vc_tipo) P o M in stato:10, 20 o 30)	43
Compilazione del Verbale di Campionamento.....	44
FAQ – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS.....	48

DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

DEFINIZIONE PRODOTTO

PWA utilizzabile sia da PC che da dispositivi mobili (tablet, smart phone) per la compilazione dei verbali di campionamento.


I dati relativi al campionamento vengono caricati in automatico sul sito WEB attraverso una connessione https (connessione che usa trasferimento sicuro e criptato di tipo SSL).



COMPILAZIONE VERBALE CAMPIONAMENTO

Il campionatore potrà compilare il verbale di campionamento in pochi semplici passi, inserendo:

- ✓ identificativo del campione *anche tramite lettura ottica del bar code*
- ✓ Eventuali annotazioni sul campione o altre informazioni richieste
- ✓ Confermare il numero dei campioni prelevati
- ✓ Far firmare il verbale al cliente o suo rappresentante
- ✓ Confermare il completamento del verbale

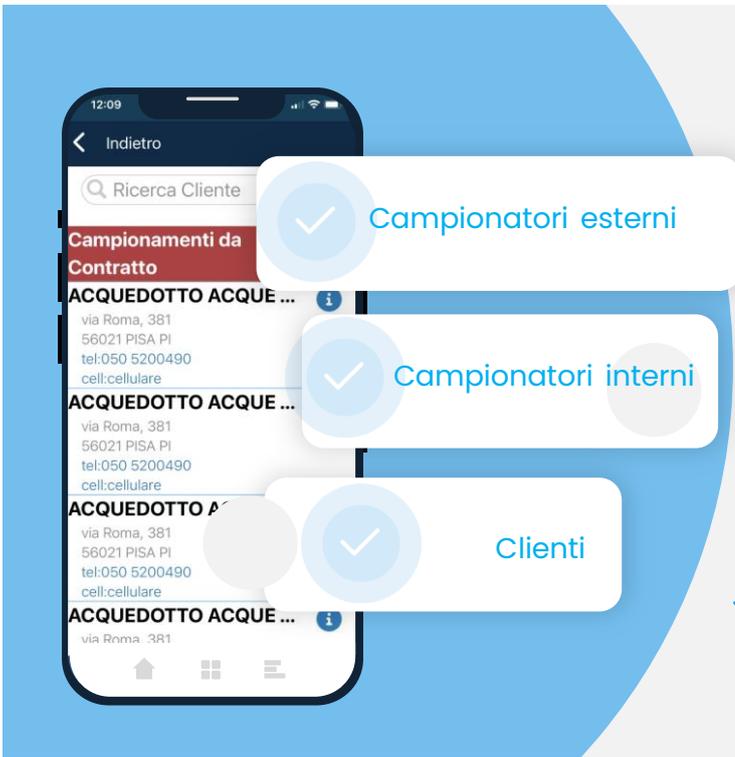

Il laboratorio potrà scaricare i verbali di campionamento completati creando in automatico le accettazioni dei campioni.

UTILIZZABILE DA

- ✓ Campionatori interni
- ✓ Campionatori esterni
- ✓ Clienti finali laboratorio

Configurazione Applicativo

Impostazioni

In Labpro AC sono presenti due maschere accessibili tramite i seguenti 2 menu:

[Campionamenti Web] → [Impostazioni]

[Campionamenti Web] → [Impostazioni Campionamenti Web]

MENU [CAMPIONAMENTI WEB] → [IMPOSTAZIONI]


NOME CAMPO	FUNZIONE
Numeratore Massimo Barcode	È possibile definire il massimo valore da assegnare ai barcode generati dall'applicativo (dopo tale valore il numeratore ricomincia da 1)
Barcode pre-assegnati	È possibile generare un verbale di campionamento precompilando per ogni campione il valore del barcode (etichetta da associare al campione) Spuntando tale opzione il verbale di campionamento che verrà quindi esportato su web conterrà per ogni campione un barcode già valorizzato (preassegnato dal Laboratorio)
Modello Verbale di default	Per ogni contratto/ verbale di campionamento è possibile definire delle informazioni aggiuntive di testata che possono poi essere compilate dal campionatore ed eventualmente stampate sul verbale di campionamento. Tali dati aggiuntivi sono configurabili e ad ogni insieme di dati aggiuntivi viene dato un codice (Modello) È possibile quindi indicare il modello di default dei campi informazioni aggiuntive di testata del verbale
Tipo Accettazione da Verbale default	Con questa opzione viene indicata la modalità di creazione di default dell'accettazione dal verbale di campionamento: 01 Per creare un'accettazione per campione 02 Per creare un'accettazione per riga contratto 03 Per creare una sola accettazione per tutto il verbale

[CAMPIONAMENTI WEB] → [IMPOSTAZIONI CAMPIONAMENTI WEB]**Scheda: Pagina Accesso Web**

NOME CAMPO	FUNZIONE
ID Cliente Web	ID Cliente assegnato da Proactive per effettuare l'accesso online (non modificabile) come Laboratorio
Pincode	Password per eseguire l'autenticazione Online da parte del Laboratorio
Logo Laboratorio	Logo del Laboratorio presente nella pagina di accesso
Ragione sociale	Ragione Sociale del Laboratorio visualizzata nella pagina di accesso Web
Indirizzo	Indirizzo del Cliente visualizzato nella pagina di accesso
Email	Email utilizzata come mittente dal modulo per inviare i Verbali di Campionamento

Scheda: Verbale di Campionamento

NOME CAMPO	FUNZIONE
Nome Laboratorio	Nome del laboratorio visualizzato nell' intestazione del verbale di campionamento
Descrizione	Descrizione del laboratorio visualizzato nell' intestazione del verbale di campionamento
Indirizzo	Indirizzo del laboratorio visualizzato nell' intestazione del verbale di campionamento
Tel/Fax	Tel/Fax visualizzato nell' intestazione del verbale di campionamento
C.F./P.I.	C.F./P.I. visualizzato nell' intestazione del verbale di campionamento
Email	Email visualizzato nell' intestazione del verbale di campionamento
Logo Verbale	Logo visualizzato nell'intestazione del verbale di campionamento
Note testata verbale RTF	Note testata in formato RTF
Note piede verbale RTF	Note piede in formato RTF
Carta Intestata Note1	1° Descrizione Carta Intestata di piede Verbale Prelievo Campioni
Carta Intestata note 2	2° Descrizione Carta Intestata di piede Verbale Prelievo Campioni
Note testata verbale	Note testata posizionate sopra le note di testata verbale RTF
Note piede verbale	Note piede posizionate sopra le note di piede verbale RTF

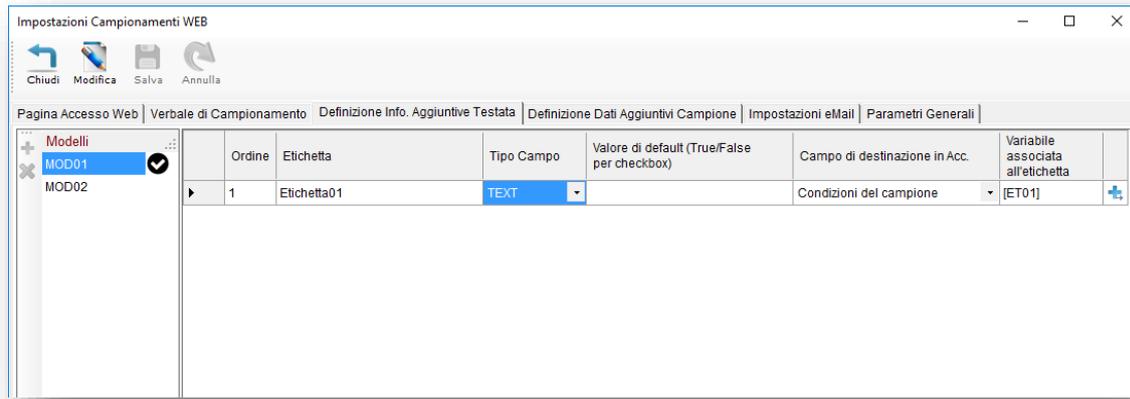Scheda: Definizione Informazioni Aggiuntive Testata

NOME CAMPO	FUNZIONE
Nuovo	Creare un nuovo Modello di Testata
Elimina	Eliminare un Modello di Testata già esistente
Default	Comparirà la spunta sul modello definito come default dal menù [Campionamenti Web] → [Impostazioni] pop-up: Modello Verbale di default, se il modello è impostato come default non è possibile procedere con l'eliminazione, sarà necessario rimuovere o cambiare il modello dalle impostazioni. Modelli di testata diversi potranno essere associati a specifici contratti.
Ordine	Ordine di visualizzazione nella finestra di gestione su Web delle righe dei dati aggiuntivi
Etichetta	Etichetta visualizzata nella finestra di gestione su Web dei dati aggiuntivi
Tipo Campo	Definizione del tipo del campo (TEXT, CHECKBOX, POPUP): TEXT nella finestra Web comparirà una casella di testo compilabile CHECKBOX : nella finestra Web comparirà una casella compilabile o meno con una spunta POPUP : nella finestra Web comparirà una casella dalla quale sarà possibile scegliere uno dei valori contenuti nel campo "Valore di default", separati da pipe ()
Valore di Default	Valore di default assegnato al campo che verrà mostrato nella finestra Web; nel caso di utilizzo del campo POPUP il campo dovrà contenere la lista dei valori selezionabili separati da pipe ()
Campo di destinazione in Accettazione	Campo di destinazione dell'accettazione LabPro dove il dato compilato su web verrà salvato a seguito dell'importazione del verbale di campionamento e generazione successiva dell'accettazione
Definisci Variabile	Permette la creazione di un codice che potrà esser utilizzato come variabile. Tale variabile potrà essere inserita in: note di piede del verbale di campionamento/note di piede per tipo campione note di testata del verbale di campionamento/note di testata per tipo campione oggetto mail di invio verbale di campionamento corpo mail di invio verbale di campionamento per esser poi sostituita con il valore inserito dal campionario durante la

	compilazione del verbale di campionamento.
--	--

Esempio di utilizzo dati aggiuntivi testata

L'immagine sotto riportata rappresenta un esempio di definizione dei dati aggiuntivi a livello generale di verbale di campionamento.

amento Definizione Info. Aggiuntive Testata

Ordine	Etichetta	Tipo Campo	Valore di default (True/False per checkbox)	Campo di destinazione in Acc.	Variabile associata all'etichetta
1	Rappresentante della ditta durant...	TEXT			[RAPP]
2	Restituzione del campione	POPUP	SI NO Ritira il corriere	Restituzione campione	
3	Sede di campionamento	TEXT		Luogo prelievo	
4	Temperatura ambientale al prelie...	POPUP	0:5C* 6:10 c* 10:15c* >15C°	Suffisso Campo Modello 40	
5	Inizio campionamento ore	TEXT			[INIZIO]
6	Fine campionamento ore	TEXT			[FINE]

Informazioni Aggiuntive Verbale

Descrizione	Tipo Camp.
Rappresentante della ditta durante campionatura Sig. Mario Rossi	
Restituzione del campione Ritira il corriere	
Sede di campionamento Azienda xxxx	
Temperatura ambientale al prelievo 0:5C° 6:10 c° 10:15c° >15C°	

Salva Chiudi

Info. Aggiuntive ←

Nella figura a sinistra la scheda "Informazioni Aggiuntive verbale", compilabile dall'applicazione campionamenti Web, riporterà le informazioni elencate nella scheda di definizione.

Scheda: Definizione Dati Aggiuntivi Campione

Analogamente alle informazioni aggiuntive di Testata è possibile definire informazioni aggiuntive personalizzate a livello di singolo campione

Impostazioni Campionamenti WEB


Chiedi Modifica Salva Annulla

Pagina Accesso Web | Verbale di Campionamento | Definizione Info. Aggiuntive Testata | Definizione Dati Aggiuntivi Campione | Impostazioni eMail | Parametri Generali

Modelli Tipo Camp. acqua destinata al consumo umano

Ordine	Etichetta	Tipo Campo	Valore di default (True/False per checkbox)	Campo di destinazione campione
1	Etichetta	TEXT	Prova	Etichetta,Lotto

NOME CAMPO	FUNZIONE
+ Nuovo	Creare un nuovo Modello di Corpo
✗ Elimina	Eliminare un Modello di Corpo già esistente
Ordine	Ordine di visualizzazione nella finestra dati aggiuntivi
Etichetta	Etichetta visualizzata nei dati aggiuntivi del campione
Tipo Campo	Definizione del tipo del campo (TEXT,CHECKBOX o POPUP)
Valore di Default	Valore di default assegnato al campo che verrà mostrato nella finestra Web; nel caso di utilizzo del campo POPUP il campo dovrà contenere la lista dei valori selezionabili separati da pipe ()
Campo di destinazione campione	Campo di destinazione in accettazione contenente i dati del campione

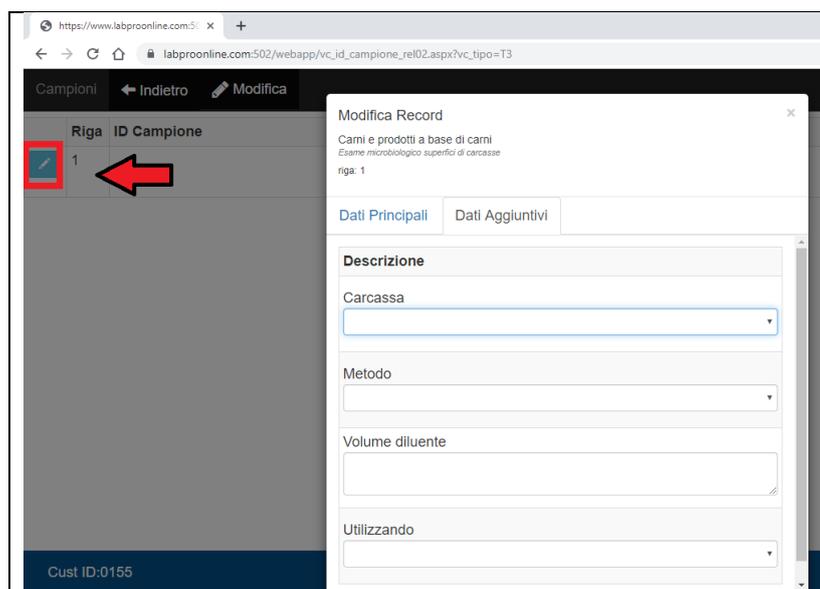

Facendo accesso sul web nei dettagli del campione è possibile visualizzare la scheda Dati Aggiuntivi con i campi definiti nell'apposita scheda.

Scheda: Impostazioni eMail

NOME CAMPO	FUNZIONE
SMTP	Indirizzo SMTP della email utilizzata dal modulo Campionamenti Web
Porta	Porta della email utilizzata dal modulo Campionamenti Web
Utente	Nome Utente di accesso della casella Email
Password	Password di accesso della casella Email
Abilita SSL(flag)	Impostazioni della casella di posta elettronica dell'utente
Usa autenticazione Client(flag)	Impostazioni della casella di posta elettronica dell'utente
a:	Campo di Test destinatario email utilizzato per verificare il funzionamento della casella di posta elettronica
cc:	Campo di Test Copia Conoscenza (CC) utilizzato per verificare il funzionamento della casella di posta elettronica
Oggetto:	Campo di Test Oggetto destinatario email utilizzato per verificare il funzionamento della casella di posta elettronica
Messaggio:	Campo di Test corpo Messaggio utilizzato per verificare il funzionamento della casella di posta elettronica
Oggetto Mail	Oggetto delle Email di Default
Corpo Mail	Corpo delle Email di Default

Scheda: Parametri Generali

Impostazioni Campionamenti WEB

Chiudi Modifica Salva Annulla

Pagina Accesso Web | Verbale di Campionamento | Definizione Info. Aggiuntive Testata | Definizione Dati Aggiuntivi Campione | Impostazioni eMail | **Parametri Generali**

Numeratore Verbale

Numeratore per Campionatore

Composizione Numero Verbale
%YV: Anno di Data Verbale
%MV: Mese di Data Verbale
%GV: Giorno di Data Verbale
%NmV: Numero Verbale
%CC: Codice campionatore
%PC: Prefisso campionatore

Lunghezza (%NmV: Numero Verbale)

Reimposta Numeratore Verbale Ogni


Mostra Analisi fittizie

NOME CAMPO	FUNZIONE
Numeratore per Campionatore	Spuntando la casella durante la definizione del numeratore del verbale di campionamento sarà resa obbligatoria la compilazione del campo relativo al campionatore e conseguentemente verrà generato un numero di verbale di campionamento per ogni campionatore abilitato su Web
Composizione numero verbale	È possibile indicare come dovrà essere formattato il numero del verbale di campionamento, le variabili a disposizione sono: %YV : Anno di Data Verbale %MV : Mese di Data Verbale %GV : Giorno di Data Verbale %NmV: Numero Verbale %CC: Codice campionatore %PC: Prefisso campionatore
lunghezza Numero Verbale	Indica la lunghezza del numero identificato dalla variabile %NmV
Reimposta numeratore Verbale Ogni	Permette di impostare il criterio di re inizializzazione del numeratore Verbale, i criteri disponibili sono: MAI GIORNO MESE ANNO
Mostra Analisi Fittizie	Se tale casella viene spuntata nella pagina dei Campionamenti Web nella sezione Risultati Prove del campione verranno mostrate anche le analisi fittizie


Numeratore Verbale

Dal menù [Campionamenti Web]→[Numeratore Verbale] è possibile creare i numeratori verbale (con i relativi criteri di numerazione) da assegnare durante la creazione del verbale di campionamento.

Nelle impostazioni dal menù [Campionamenti Web]→[Impostazioni Campionamenti Web] scheda **Parametri Generali** è possibile decidere la composizione del numeratore del verbale e la relativa lunghezza e la reimpostazione del numeratore del verbale dopo un determinato periodo di tempo, se è spuntata la casella **Numeratore per Campionatore** non sarà possibile creare un numeratore che non abbia associato un Campionatore Web.

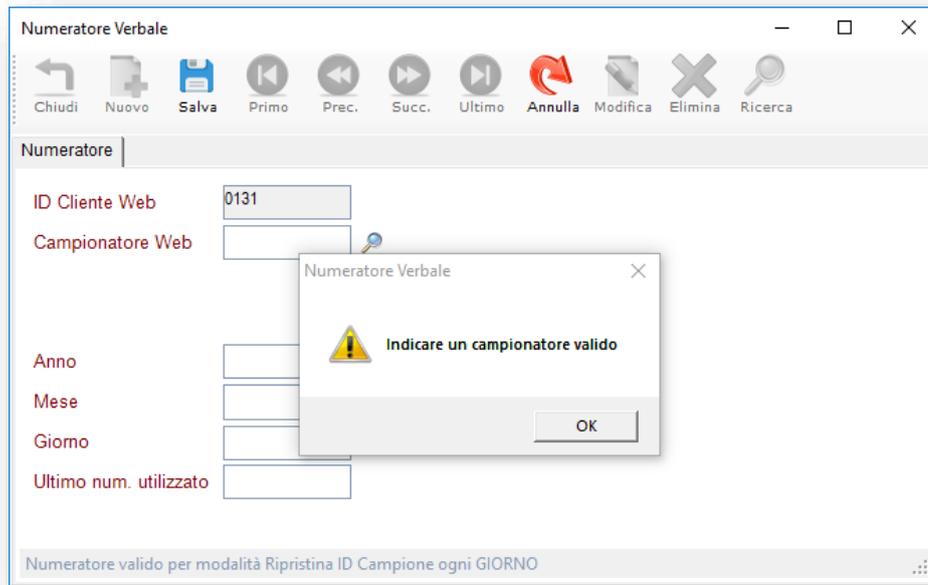

Togliendo la spunta alla casella **Numeratore per Campionatore** è possibile creare un numeratore che non abbia associato nessun Campionatore, facendo ciò si utilizzerà lo stesso numeratore per tutti i campionatori web.

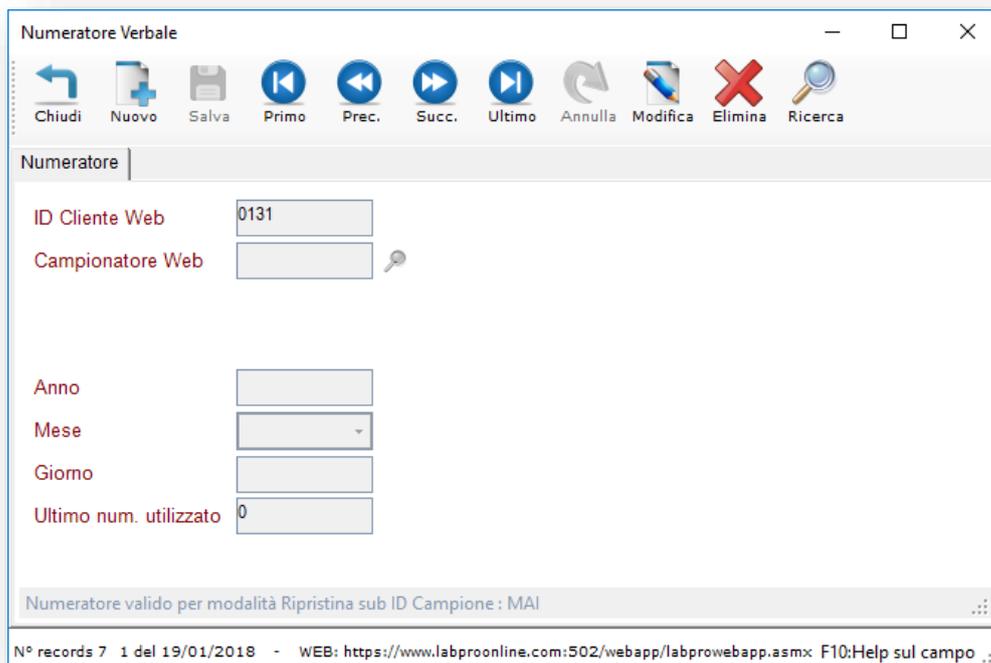

Creazione Campionatori Web

menu [Campionamenti Web] → [Campionatori Web]

Campionatori Web

Chiudi Nuovo Salva Primo Prec. Succ. Ultimo Annulla Modifica Elimina Spedisci Ricerca

Numeratore

ID Cliente Web: 0131

Codice: MR Mario Rossi

Descrizione: Mario Rossi

Tipo:

Password: 12345

E-mail: mariorossi@prova.it

Abilita gestione Barcode:

Prefisso: 01

Immagine Firma:

N° records 3 Rev 1 del 19/01/2018 - WEB: https://www.labproonline.com:502/webapp/labprowebapp.aspx

ID Cliente Web	ID Cliente Web al quale è associato il Campionatore
Codice	Codice Campionatore (Utilizzato per l'accesso alla pagina Campionamenti Web)
Descrizione	Descrizione Campionatore
Tipo	Tipologia campionatore (lunghezza 4 caratteri). Nessuna funzionalità standard
Password	Password per accesso alla pagina Campionamenti Web
Genera Password	Genera automaticamente una password per il Campionatore Web
E-mail	Email Campionatore
Abilita gestione Barcode	Spuntare la casella per Abilitare la gestione del barcode tramite barcode pre-assegnati o non pre-assegnati. Spuntando la casella, su Web, non sarà possibile modificare manualmente il barcode ma dovrà essere selezionato da una lista (barcode non assegnati) oppure sarà già presente il barcode relativo al campione (barcode pre-assegnati)
Prefisso	Obbligatorio se Abilita gestione Barcode è spuntato, selezionare il prefisso del numeratore del barcode
Immagine Firma	Immagine di firma del campionatore che viene riportata sul verbale di Campionamento

INVIO CREDENZIALI DI ACCESSO AL CAMPIONATORE

The screenshot shows the 'Campionatori Web' application window. The toolbar at the top includes buttons for 'Chiudi', 'Nuovo', 'Salva', 'Primo', 'Prec.', 'Succ.', 'Ultimo', 'Annulla', 'Modifica', 'Elimina', 'Spedisci' (highlighted with a red box), and 'Ricerca'. The main form area is titled 'Numeratore' and contains the following fields:

ID Cliente Web	0131
Codice	MR Mario Rossi
Descrizione	Mario Rossi
Tipo	
Password	12345
E-mail	marirossi@prova.it ←

Cliccando sul pulsante **Spedisci** sarà possibile inviare le credenziali di accesso all'E-Mail al campionatore.

Il Programma utilizza come predefinite le impostazioni definite nelle impostazioni email di LabPro in [Risultati]→[Impostazioni] scheda **Email** e in [Gestione Applicativo]→[Parametri Invio Documenti per e-mail].

Di seguito un esempio della mail per l'invio credenziali di accesso al campionatore:

The screenshot shows the 'Invio Mail' window with the following details:

- Da:** proactive@proactive-info.it Invia In CCn
- A...:** marirossi@prova.it
- Cc...:** (empty)
- Oggetto:** Comunicazione Credenziali di Accesso
- Allegato:** (empty)

The email body contains the following text:

Gentilissimo/a Mario Rossi,

le comunichiamo le credenziali di accesso al servizio Campionatori WEB.

Login: MR
Password: 12345

Distinti saluti e buona navigazione

Esportazione Contratti

ESPORTAZIONE CONTRATTI

Per esportare un contratto sul Web è necessario creare un contratto con Associato un Campionatore definito in Campionatori Web e spuntare la casella **esporta per campionamento web** nella scheda Campionamento Web.

The screenshot shows the 'Contratti' application window. The top toolbar contains various icons for navigation and actions. Below the toolbar, the 'Anno' is set to 2019 and 'N°' to 1, with a date of 10/01/2019. The 'Campionamento Web' tab is active, displaying a form with the following fields:


- Dati Principali:** Stato, Cliente (000002), Contatto, Tipo Documento (Contratto dal 18/1), Valido dal (10/01/2019).
- Dati Specifici:** Richiesta cliente N°, Luogo Prelievo, Campionatore (MR, Mario Rossi), Procedura di Camp., Resp. Analisi.
- Campionamento Web:** Note Campionamento Web, Esporta per campionamento Web (checked), Data esportazione, ID verbale di campionamento, Tipo Doc. Verbale (Verbale campionamenti Web), Modello Verbale (MOD01).

Se nel contratto sono definiti dei campionamenti confermati esporteremo sul web il contratto e i campionamenti confermati del contratto, se nel contratto sono confermati più campionamenti in date diverse verranno esportati più campionamenti confermati per il contratto.

Nell'esempio sotto in **esportazione campionamenti web** verranno esportati 2 campionamenti confermati in base alla data di conferma del campionamento, in caso di gestione con barcode pre-assegnati verranno assegnati 3 barcode in base al numero campioni dei campionamenti confermati, nel contratto saranno presenti in questo caso 4 righe contratto con le relative analisi.

+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Decr. Lgs	Prz Unit.	N°Campioni	Totale	Frequenza Campionamento	Data Inizio	Data Conf.	Ora Conf.		
		€ 11,00	1	€ 11,00	+		16/01/2019			
		€ 20,00	1	€ 20,00	+		16/01/2019			
		€ 5,00	1	€ 5,00	+		17/01/2019			
		€ 5,00	1	€ 5,00	+					

Dal menù [Campionamenti Web] → [Esportazione Campionamenti] è possibile esportare il contratto e i relativi campionamenti sul web dalla maschera spuntando la casella **Esporta contratti e campionamenti** cliccare prima sul Pulsante **Carica** e poi su **Esporta**.

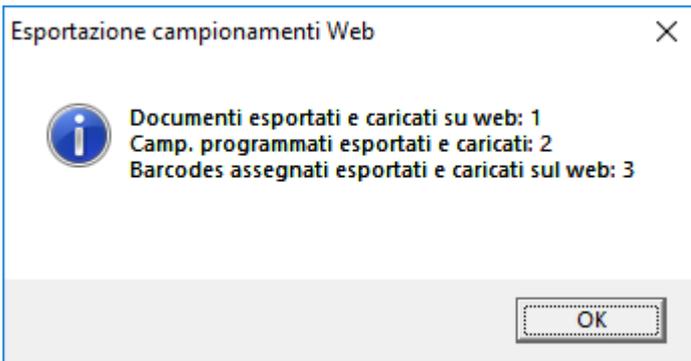

Effettuando l'Accesso alla pagina web troveremo le seguenti esportazioni:

Labpro VC Cambia Password

Verbali Confermati Indietro Logout

Camp.	Data Conf.	Cliente
MR Mario Rossi	2019-01-16	Hotel XXXXXXXXXXXX Via XXXXXXXXXXXX 80077 ISCHIA NA
MR Mario Rossi	2019-01-17	Hotel XXXXXXXXXXXX Via XXXXXXXXXXXX 80077 ISCHIA NA

Campionamenti Confermati

Campionamenti da Contratto

Verbali di Campionamento compilati

Guida rapida

Contratti Pagina Precedente Logout

Ricerca Cliente

Camp.	Cliente
MR Mario Rossi	Hotel XXXXXXXXXXXX Via XXXXXXXXXXXX 80077 ISCHIA NA

Cust ID.0131 ID Utente:0131 (Laboratorio) Release 1.1

CANCELLAZIONE CONTRATTI E CAMPIONAMENTI SUL WEB

Dall'Applicativo LabPro nel menù dei contratti [Contratti]→[Contratti] è possibile eliminare il contratto e i relativi campionamenti accedendo alla scheda **Campionamenti Web** e cliccando sul pulsante **Elimina contratto sul Web**, successivamente apparirà un messaggio di conferma di cancellazione del contratto, per procedere con la cancellazione bisogna cliccare su **Si**.

The screenshot displays the LabPro application interface. At the top, there is a menu bar with various icons for file operations and navigation. Below the menu bar, there are tabs for 'Dati Principali', 'Dati Specifici', 'Dati Utente', 'Documenti Correlati', 'Fatturazione Elettronica', and 'Campionamento Web'. The 'Campionamento Web' tab is active, showing a form with fields for 'Data esportazione' (17/01/2019), 'ID verbale di campionamento' (919000019), 'Tipo Doc. Verbale' (Verbale campionamenti Web), and 'Modello Verbale' (MOD01). A dialog box is overlaid on the form, containing the text 'Attenzione! Il contratto verrà eliminato dal WEB. Proseguire?' and two buttons: 'Si' (Yes) and 'No' (No). A red arrow points to the 'Si' button. The dialog box also has a close button (X) in the top right corner.

Effettuando l'Accesso alla pagina web dentro le sezioni Campionamenti Confermati e Campionamenti da Contratto non sarà più visibile il contatto e i verbali appena cancellati.

The screenshot shows the LabPro application interface with a sidebar menu. The menu items are: 'Campionamenti Confermati', 'Campionamenti da Contratto', 'Verbali di Campionamento compilati', and 'Guida rapida'. The 'Campionamenti Confermati' section is highlighted with a red arrow pointing to a 'Verbali Confermati' window. The 'Campionamenti da Contratto' section is highlighted with a red arrow pointing to a 'Contratti' window. The 'Verbali Confermati' window shows a search bar and a list of records. The 'Contratti' window shows a search bar and a list of records. The bottom of the screen displays the user ID 'Cust ID:0131' and 'ID Utente:0131 (Laboratorio) Release 1.1'.

Gestione Barcode

Numeratore Barcode

[CAMPIONAMENTI WEB] → [NUMERATORE BARCODE]

È possibile creare i numeratori barcode da assegnare a uno o più Campionatori Web. Il numeratore Barcode viene utilizzato nello specifico nel flusso di generazione dei barcode o durante l'esportazione dei contratti sul web (in caso di gestione di barcode pre-assegnati).


BARCODE PER CAMPIONAMENTI WEB

Dal menù [Campionamenti Web] → [Barcode per campionamenti Web] è possibile visualizzare lo stato dei barcode già generati, annullare eventualmente i barcode e generarne di nuovi.

Generazione Barcode



Dal menù [Campionamenti Web] → [Barcode per Campionamenti Web] cliccando su **Genera Barcode** è possibile generare i barcode da esportare sul web relativi a un determinato campionatore.

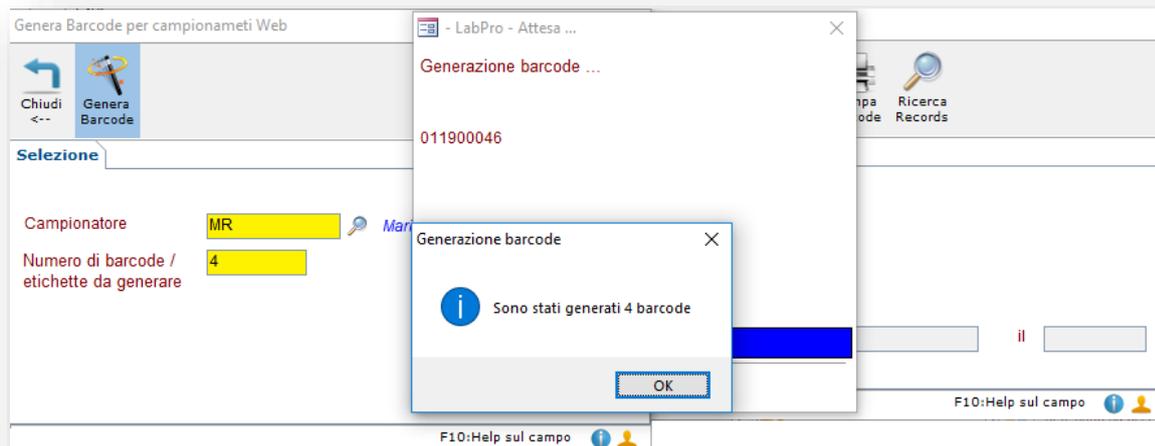

Tipi di Utilizzo Barcode

BARCODE NON PRE-ASSEGNATI

The screenshot shows a web application window titled 'Campionatori Web'. The interface includes a toolbar with icons for 'Chiudi', 'Nuovo', 'Salva', 'Primo', 'Prec.', 'Succ.', 'Ultimo', 'Annulla', 'Modifica', 'Elimina', 'Spedisci', and 'Ricerca'. Below the toolbar is a form with the following fields:

- ID Cliente Web: 0131
- Codice: MR (with a search icon and 'Mario Rossi' text)
- Descrizione: Mario Rossi
- Tipo: (empty)
- Password: 12345 (with a search icon)
- E-mail: mariorossi@prova.it
- Abilita gestione Barcode: (highlighted with a red square)
- Prefisso: 01 (with a search icon)
- Immagine Firma: (empty, with icons for search, add, and delete)

At the bottom of the window, it displays 'N° records 3', 'Rev 1 del 19/01/2018', and the URL 'WEB: https://www.labproonline.com:502/webapp/labprowebapp.asm...'.

Con la gestione barcode senza pre-assegnamento, i barcode esportati su web potranno essere utilizzati dai campionatori **abilitati alla gestione del barcode**. I campionatori abilitati alla gestione del barcode non possono inserire barcode diversi da quelli presenti sul web. Il campionatore che non è abilitato alla gestione del barcode potrà gestire il **barcode manualmente**.

The screenshot shows a 'Modifica Record' dialog box. It has a 'Barcode' input field which is currently empty. Below it is a section titled 'Elenco Barcode utilizzabili' containing a list box with the following items:

- 011900043
- 011900044
- 011900045
- 011900046

At the bottom of the dialog, there is a 'Confermato' checkbox which is checked, and three buttons: 'Salva', 'Elimina', and 'Chiudi'.

Tentando di inserire un barcode non presente nella lista si avrà il seguente messaggio e non sarà possibile salvare

Campioni ← Indietro ✎ Modifica

Riga	ID Campione
1	

Attenzione

Barcode non valido
Selezionane uno dall' elenco

Chiudi

Modifica Record

Barcode

111111

Elenco Barcode utilizzabili

Nota

Confermato

Salva Elimina Chiudi

BARCODE MANUALI

Campionatori Web

Chiedi Nuovo Salva Primo Prec. Succ. Ultimo Annulla Modifica Elimina Spedisci Ricerca

Numeratore

ID Cliente Web 0131

Codice MR Mario Rossi

Descrizione Mario Rossi

Tipo

Password 12345

E-mail mariorossi@prova.it

Abilita gestione Barcode

Prefisso 01

Immagine Firma

N° records 3 Rev 1 del 19/01/2018 - WEB: https://www.labproonline.com:502/webapp/labprowebapp.aspx

Per modificare manualmente i barcode non deve essere abilitata la gestione dei **Barcode pre-assegnati** e il Campionatore definito sul contratto **non** deve essere **abilitato alla gestione Barcode**.

Il campionatore, una volta fatto accesso al web , potrà modificare manualmente i barcode.

Campioni

Indietro Annulla Salva

Riga	ID Campione
1	Barcode_manuale

Modifica Record

Barcode Barcode_manuale

Elenco Barcode utilizzabili

Nota

Confermato

Salva Elimina Chiudi

BARCODE PRE-ASSEGNATI

Dal menù [Campionamenti Web]→[Impostazioni] è possibile utilizzare il Flusso dei Barcode Pre-assegnati spuntando la casella **Barcode pre-assegnati**.

Impostazioni

Chiudi <<<

Parametri generali

Id Laboratorio: 0131

Uri Servizio Web: http://www.labproonline.com:501/webapp/labprowebapp.asmx

Numeratore Massimo Barcode: 99999

Barcode pre-assegnati:

Modello Verbale di default: MOD01

Tipo Accettazione da Verbale default: 01 [Crea un'accettazione per campione](#)

Per Pre-Assegnare il barcode è necessario creare un contratto con **campionamento confermato** e con un campionatore **abilitato alla gestione del barcode**.

Esportazione Campionamenti

Chiudi Carica Esporta Strumenti Griglia ▾

Campionatore: ID Cliente Web: 0131

Cliente: Esporta contratti e campionamenti:

Contratto: Esporta barcode non assegnati:


Documento Anno	Documento Num.	Tipo Doc.	Cliente Cod	Cliente	Contatto	Campionatore	Id Verbale
2019	1	Contratto	000002	Hotel XXXXXXXXXXXX		Mario Rossi	

Campionatore Barcode non assegnato


Numero di contratti: 1 barcode: 0

Rev 1 del 19/01/2018 - WEB: https://www.labproonline.com:502/webapp/labprowebapp.asmx

Con l'esportazione del campionamento sul web LabPro pre-assegnerà i barcode ai campionamenti confermati.

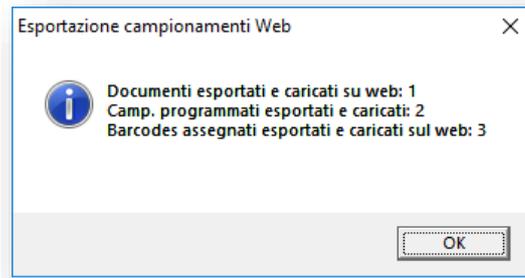


Facendo accesso al web troveremo i contratti esportati con i relativi barcode pre-assegnati.

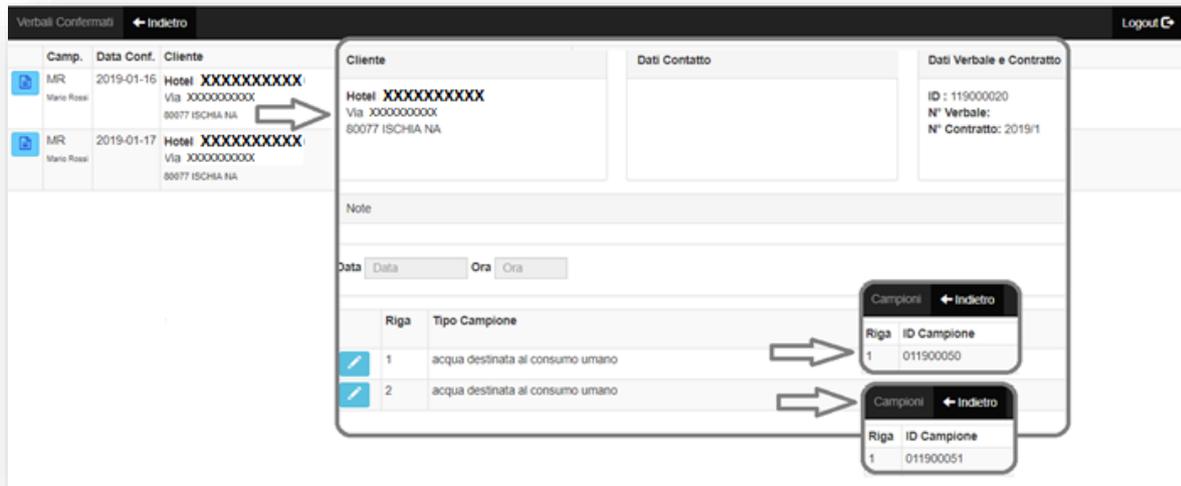

Esportazione Barcode sul Web

Dal menù [Campionamenti Web]→[Esportazione Campionamenti] è possibile esportare i barcode sul web dalla maschera spuntando la casella **Esporta barcode non assegnati** cliccare prima sul Pulsante **Carica** e poi su **Esporta**.

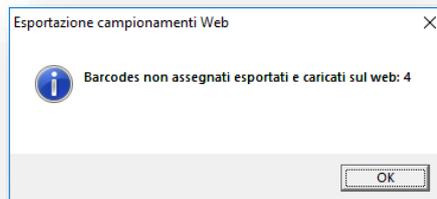

Una volta trasferito sul web il barcode passa allo stato 2: trasferito su web

Importazione Campionamenti

[Campionamenti Web]→[Importazione Campionamenti]

Dal menù [Campionamenti Web]→[Importazione Campionamenti] è possibile importare i **verbali di campionamento confermati**, creando in Labpro le relative accettazioni.

Qualora non sia necessario effettuare importazioni specifiche sarà sufficiente cliccare su “Carica Dati”, quindi su “Seleziona tutto” ed infine su “Genera accettazioni”.

NOME CAMPO	FUNZIONE
Campionatore	Selezionare (eventualmente) il campionario per il quale si vogliono importare i verbali di campionamento
Data campionamento	Selezionare (eventualmente) il periodo per il quale si vogliono importare i verbali
Stato verbale	Normalmente si importeranno i verbali in stato “Confermato”; qualora si voglia reimportare dei verbali sarà necessario ripristinare lo stato dello stesso da Importato a confermato, estraendo pertanto i verbali in stato “Importato”
Genera accettazioni anche per campioni già importati	Qualora sia stata effettuata una importazione parziale di un verbale di campionamento (solo alcuni campioni) fleggando la casella verranno reimportati anche i campioni già importati


BOTTONE SU BARRA LATERALE	FUNZIONE
Genera Accettazioni da Singolo Verbale	Visualizzare/modificare il tipo di generazione delle Accettazioni all'importazione del verbale di campionamento e visualizzare il riepilogo delle accettazioni da generare con la possibilità di modifica della data e del numero di accettazione.

 Visualizza informazioni sul Cliente	Visualizzare le informazioni sul cliente
 Visualizza informazioni sul Contatto	Visualizzare le informazioni sul contatto
 Ripristino verbale come da confermare	Ripristino del verbale di campionamento in stato ancora da confermare sul web

Importazione con creazione di nuovi clienti e contatti

L'applicativo Campionamenti WEB dà la possibilità di redigere verbali di campionamento anche se il cliente non è ancora stato censito nell'applicativo. Si pensi al caso in cui l'applicazione venga utilizzata da un campionario esterno (es. consulente) che non ha comunicato al laboratorio i dati anagrafici del nuovo cliente presso il quale effettua il campionamento. In questo caso è possibile indicare i dati anagrafici del cliente finale direttamente sull'applicazione WEB.

Per creare l'Anagrafica del Cliente o/e Contatto sul web è necessario esportare un contratto con Crea nuova anagrafica definito sull'anagrafica che andremo a creare.

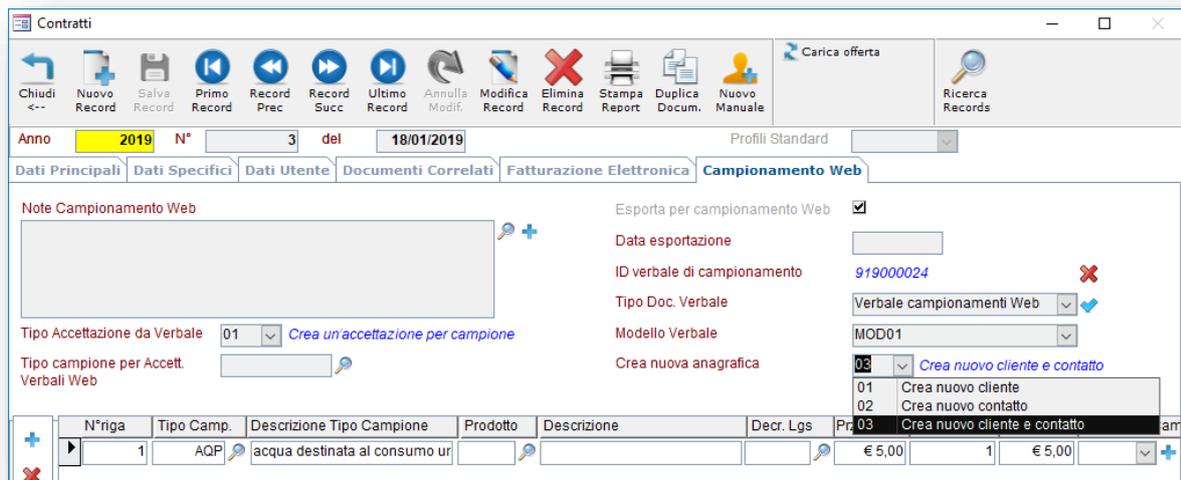

Dopo aver esportato il contratto, facendo accesso al web creando un verbale di campionamento sul contratto che abbiamo esportato sarà possibile creare un nuovo cliente e creare un nuovo contatto.

Verbale ← Indietro ✓ Conferma 📄 PDF ✉ Invia ℹ Info, Aggiuntive ✕ Elimina

Stato: Salvato

Cliente ✎

Hotel XXXXXXXXXXXX
Via XXXXXXXXXXXX
80077 ISCHIA NA

Dati Contatto ✎

Richiesta di Conferma

Inserire un nuovo cliente?

SI No

Dati Verbale e Contratto

ID : 519000136
N° Verbale: 19009
N° Contratto: 2019/3

Cliente

Ragione Sociale

Ragione Sociale

Indirizzo

Indirizzo

CAP **Città**

CAP Città

Provincia

Provincia

Telefono **Cellulare**

Telefono Cellulare

P.IVA **Cod. Fiscale**

P.IVA Codice Fiscale

e-mail

e-mail

Salva Elimina Chiudi

Note

Data 2019-01-18 Ora 16:07

Riga	Tipo Campione
1	acqua destinata al consumo umano

Firma ✎

Nessuna Firma Salvata

Cust ID:0131 ID Utente: MR Release 1.1

Verbale ← Indietro ✓ Conferma 📄 PDF ✉ Invia ℹ Info, Aggiuntive ✕ Elimina

Stato: Salvato

Cliente ✎

Hotel XXXXXXXXXXXX
Via XXXXXXXXXXXX
80077 ISCHIA NA

Dati Contatto ✎

Richiesta di Conferma

Inserire un nuovo contatto?

SI No

Dati Verbale e Contratto

ID : 519000139
N° Verbale: 19012
N° Contratto: 2019/3

Contatto

Descrizione

Descrizione

Ragione Sociale

Ragione Sociale

Indirizzo

Indirizzo

CAP **Città**

CAP Città

Provincia

Provincia

Telefono **Cellulare**

Telefono Cellulare

P.IVA **Cod. Fiscale**

P.IVA Codice Fiscale

e-mail

e-mail

Salva Elimina Chiudi

Note

Data 2019-01-18 Ora 16:11

Riga	Tipo Campione
1	acqua destinata al consumo umano

Firma ✎

Nessuna Firma Salvata

Cust ID:0131 ID Utente: 0131 (Laboratorio) Release 1.1

L'importazione dei campionamenti carica tutti i verbali di campionamento confermati.

Anagrafiche clienti/contatti da creare

Codice cliente	Descrizione	Codice contatto	Descrizione
🔍 + ?	Cliente di Prova	🔍 + ?	Contatto di Prova

Prima di eseguire l'importazione nel caso di nuovi clienti e contatti da creare è necessario creare le nuove anagrafiche inserite dal web in LabPro (Premendo il tasto inserisci verranno prese come default le informazioni inserite sul web relative al cliente e al contratto) o assegnare al verbale un cliente già esistente.

Generazione Accettazioni da Singolo Verbale


Dalla funzione è possibile modificare la modalità di generazione delle accettazioni in LabPro e visualizzare il riepilogo delle accettazioni da generare con la possibilità di modifica della data e del numero di accettazione.

NOME CAMPO	FUNZIONE
Da numero verbale a documento n°	Dati identificativi del verbale di campionamento da importare (non modificabili)
Tipo Accettazione	<p>Sono possibili le seguenti scelte:</p> <p>01 - Crea un'accezzazione per campione → (5)</p> <p>02 - Crea un'accezzazione per riga contratto → (3)</p> <p>03 - Crea una sola accettazione per tutto il verbale → (1)</p> <p>04 - Crea un'accezzazione per il campioni selezionati → (in base alle selezioni)</p> <p><i>Il numero in parentesi rappresenta il numero di accettazioni che si generano dal verbale rappresentato dall'immagine sopra riportata in base alla scelta effettuata</i></p>

APP WEB

Download APP


Ricerca "labpro ac" in Play Store sul dispositivo Android.

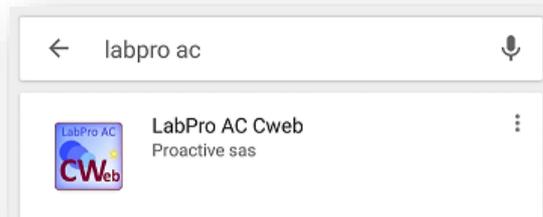

Aprire l'APP visualizzata sopra e installarla sul dispositivo




Dopo aver terminato l'installazione dell'APP sul dispositivo sarà possibile accedere all'applicazione dalla seguente Icona

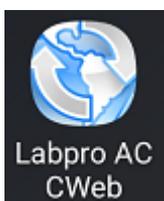

Prima Configurazione

Facendo il primo accesso dentro l'applicazione sarà necessario configurare l'ID Cliente del Laboratorio

Per visualizzare l'Id Cliente, su LabPro bisogna accedere al menù [Campionamenti Web]→[Impostazioni Campionamenti Web] → scheda **Pagina Accesso**

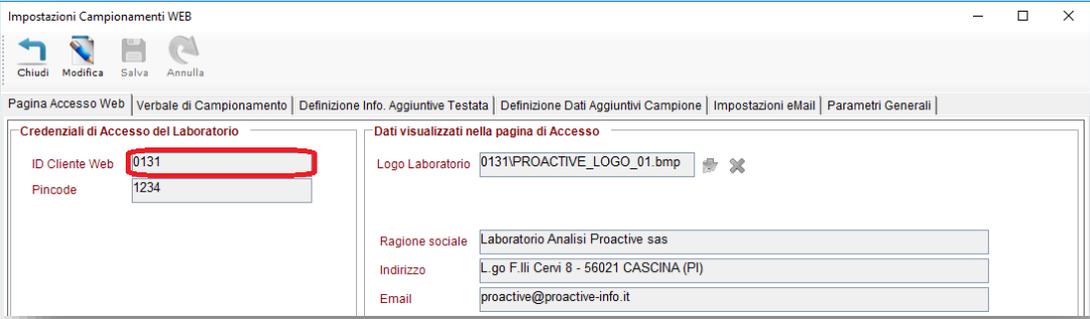

Impostazioni Campionamenti WEB

Chiedi Modifica Salva Annulla

Pagina Accesso Web | Verbale di Campionamento | Definizione Info. Aggiuntive Testata | Definizione Dati Aggiuntivi Campione | Impostazioni eMail | Parametri Generali

Credenziali di Accesso del Laboratorio

ID Cliente Web: 0131

Pincod: 1234

Dati visualizzati nella pagina di Accesso

Logo Laboratorio: 0131\PROACTIVE_LOGO_01.bmp

Ragione sociale: Laboratorio Analisi Proactive sas

Indirizzo: L.go F.lli Cervi 8 - 56021 CASCINA (PI)

Email: proactive@proactive-info.it

Dopo aver inserito l'Id Cliente riportato su LabPro nell'applicazione Labpro AC CWeb salvare l'inserimento.



Labpro AC CWeb

Attenzione ID Cliente non configurato

Cust ID

0131

Salva

Pagina di Accesso APP

Nella Pagina di Accesso dei Campionamenti Web necessita l'inserimento delle le Credenziali di Accesso dell'utente, composte dall'Id Utente e la Password.

Nel caso di accesso con le credenziali del laboratorio, inserire l'ID Utente(ID Cliente Web)e la Password(Pincode).

Credenziali di Accesso del Laboratorio	
ID Cliente Web	0131
Pincode	1234

Labpro AC CWeb

Labpro AC Campionamento Web

Login

* ID utente


0131

* Password:

Password

Login

Impostando sul dispositivo la rotazione automatica dello schermo e ruotando in orizzontale il dispositivo è possibile visualizzare più dati del Laboratorio nella schermata di accesso, le informazioni si possono impostare dal menù [\[Campionamenti Web\]](#)→[\[Impostazioni Campionamenti Web\]](#) → scheda **Pagina Accesso Web**

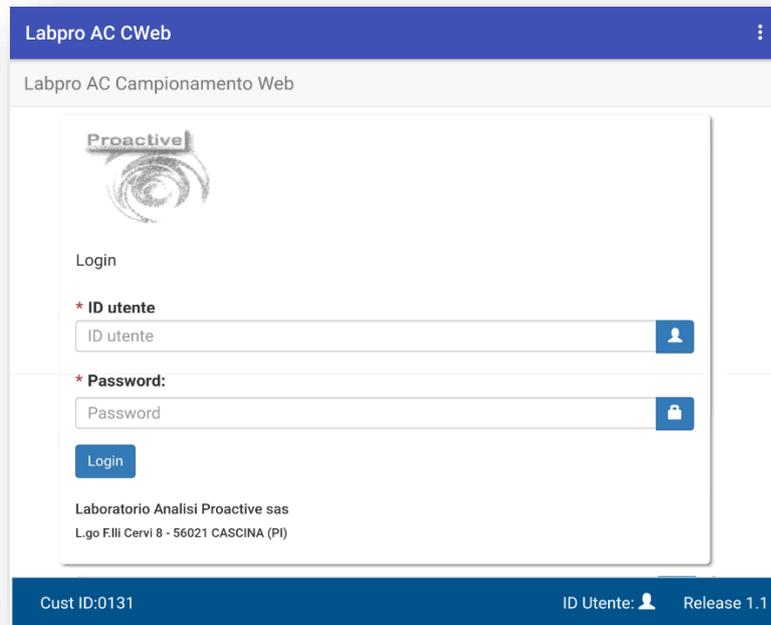

UTILIZZO DELLA WEBAPP Campionamenti WEB

È inoltre possibile utilizzare l'applicazione web direttamente dal browser dai link comunicati al cliente:

[https://www.labproonline.com:502/webapp/vc_main.aspx?custId=\[IDCLIENTE\]](https://www.labproonline.com:502/webapp/vc_main.aspx?custId=[IDCLIENTE])

es :

https://www.labproonline.com:502/webapp/vc_main.aspx?custId=0131

L'accesso sarà poi possibile tramite

	<p>ID utente = [IDCLIENTE] Password = [pincode]</p>
--	--

Impostazioni e Funzionalità schermata Principale APP WEB

Dalla schermata principale dell'APP possiamo accedere alle 3 sezioni relative ai Campionamenti Web:

Campionamenti Confermati


Campionamenti da contratto

Verbali di Campionamento Compilati


E' possibile consultare la **Guida rapida** per Informazioni sulle sezioni dell'APP




Dalla **Pagina Principale** dell'applicazione Web cliccando il pulsante in basso a destra visualizzeremo l'attuale Id Utente utilizzato per la connessione e il Cust ID del Laboratorio, mentre cliccando sul pulsante in alto a destra è possibile **Cambiare la Password** dell'Utente Connesso o Uscire dalla Sessione (nel caso dovremo di nuovo effettuare l'accesso).

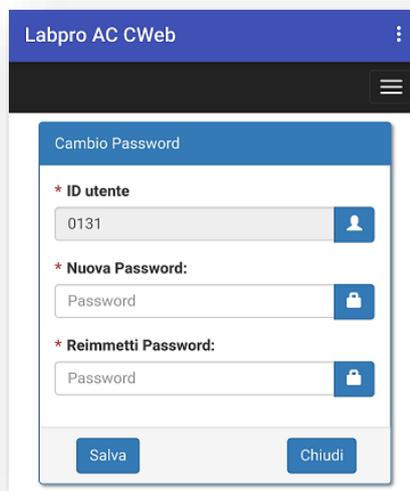

Cliccando sul bottone in alto a destra, potremo accedere alle impostazioni o uscire dall'APP.

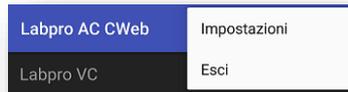

Nel menù **impostazioni** possiamo modificare il cust ID (Id Laboratorio) impostato al primo avvio dell'App e l'indirizzo Web dell'APP (fa riferimento al Id Laboratorio impostato).

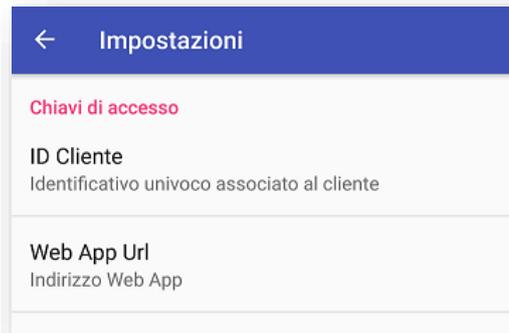

Funzionalità Pagina Campionamenti Web

Elenco Stati e Tipologie del verbale di Campionamento

Stati:

00	Nuovo	Quando viene caricato da LabPro
10	Salvato	E' stata iniziata la compilazione Web
20	Confermato	Completamento della compilazione, non è possibile apportare modifiche ad i campioni
30	Scaricato	E' stato fatto il download da LabPro ed il verbale di campionamento non è più visibile su Web

Tipologie

- P: Salvati in fase di compilazione o confermati
 C: Contratto
 M: Manuale : generato su Web dal Contratto

La Pagina dei Campionamenti Web è divisa in 3 sezioni:

- **Campionamenti Confermati, [Tipo (vc_tipo) = P stato=00]**
- **Campionamenti da Contratto, [Tipo (vc_tipo) = C stato=00]**
- **Verbali di Campionamento compilati [Tipo (vc_tipo) = P o M stato=10,20 o 30]**

Menu Principale

CAMPIONAMENTI CONFERMATI [TIPO (VC_TIPO) = P STATO=00]

I **campionamenti confermati** derivano dai campioni previsti nei contratti/ordini da cliente, il laboratorio di prova ha effettuato l'esportazione sul WEB per i quali è stata stabilita **la data ed eventualmente l'ora di conferma del campionamento**. I verbali di campionamento da compilare sono elencati in questa sezione in **ordine crescente di data confermata**.


Nella sezione dei campionamenti confermati i campioni previsti sono tutti in stato iniziale **confermato**. Il campionatore potrà eventualmente togliere il flag di conferma da alcuni campioni o da alcune prove. Nella compilazione del verbale il campionatore potrà inoltre inserire il barcode abbinato al campione se non preassegnato ed eventualmente inserire alcune annotazioni sul campione.

Una volta terminata la compilazione cliccare su **Salva**.

I verbali di campionamento salvati saranno disponibili nella sezione **Verbali di campionamento compilati**.



Visualizzazione del verbale presente sul web dalla sezione **Campionamenti Confermati**.

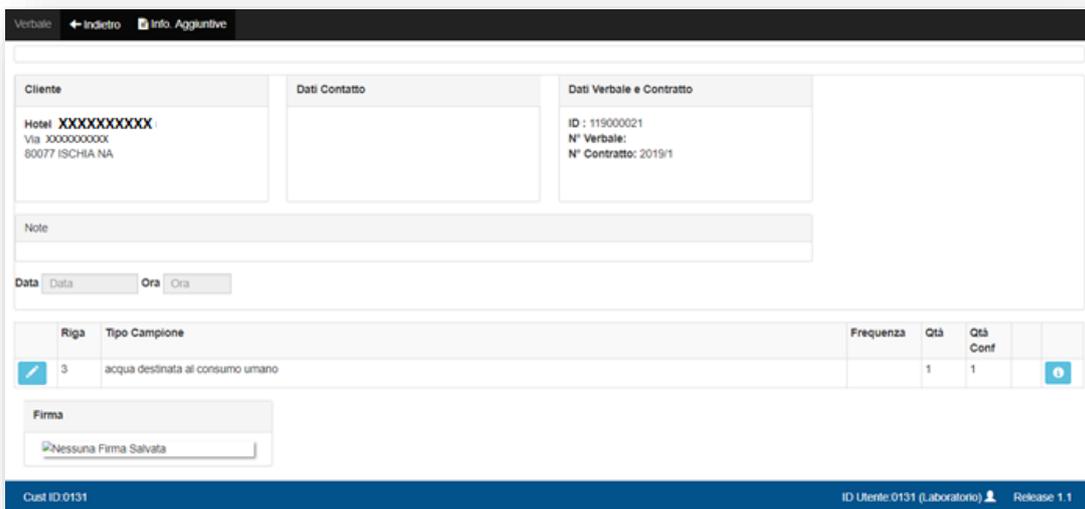

CAMPIONAMENTI DA CONTRATTO [TIPO (VC_TIPO) = C, STATO SEMPRE 00

Nella sezione **Campionamenti da contratto** vengono elencati i contratti/ordini da cliente di cui il laboratorio di prova ha effettuato l'esportazione sul WEB.

I contratti sono elencati in questa sezione in **ordine crescente di ragione sociale cliente**.

Per utilizzare la ricerca sul cliente digitare una parte del nome cliente e cliccare sull'icona di ricerca



Cliccando sull'icona a sinistra **Genera Verbale** verrà predisposto il verbale di campionamento

relativo al contratto selezionato. I verbali di campionamento generati saranno disponibili nella sezione **Verbali di campionamento compilati** tutti in stato **non confermato**. Il campionario dovrà impostare il fleg di conferma ai campioni che vengono prelevati.

Nella compilazione del verbale il campionario potrà inoltre inserire il barcode abbinato al campione ed eventualmente inserire alcune annotazioni sul campione.

Una volta terminata la compilazione cliccare su **Conferma**

Visualizzazione del verbale presente sul web dalla sezione **campionamenti da contratto**.

Contratto [← Indietro](#) [Info](#) [Aggiuntive](#)

Cliente
 Hotel: XXXXXXXXXXXX
 Via: XXXXXXXXXXXX
 80077 ISCHIA NA

Dati Contatto

Dati Verbale e Contratto
 ID: 919000023
 N° Contratto: 2019/1

Note

Data: Ora:

Riga	Tipo Campione	Frequenza	Qtà	Qtà Conf	
	1		1	0	
	2		1	0	
	3		1	0	
	4		1	0	

Cust ID 0131 ID Utente: 0131 (Laboratorio) Release: 1.1

VERBALI DI CAMPIONAMENTO COMPILATI [TIPO(VC_TIPO) P O M IN STATO:10, 20 O 30]

Nella sezione **Verballi di campionamento compilati** vengono elencati i verbali di campionamento salvati o confermati sia inizialmente presenti nella sezione **Campionamenti confermati** che generati nella sezione **Campionamenti da contratto**. I verbali di campionamento da compilare sono elencati in questa sezione in **ordine decrescente di data verbale**.

Verballi Compilati		← Indietro		Logout	
Camp.	Data Verbale	Cliente	Contatto		
 MR Mario Rossi	2019-01-23 15:03	Hotel XXXXXXXXXXXX Via XXXXXXXXXXXX 80077 ISCHIA NA			
 MR Mario Rossi	2019-01-18 16:07	Cliente di Prova Via Lunga di Prova 56038 Ponsacco Pisa tel 0587798965 cell.320 3880116	Contatto di Prova Prova Srl Via Piazza di prova 56038 Ponsacco Pisa tel 0587 734635 cell.320 388 1189		


Il campionatore potrà modificare solo i verbali salvati ma ancora non confermati (icona gialla).

I verbali di campionamento confermati (icona verde) saranno disponibili per l'importazione da parte del laboratorio di prova.

Una volta effettuata l'importazione del verbale il campionatore non lo visualizzerà più nell'elenco.

Compilazione del Verbale di Campionamento

Azioni possibile relative al Verbale di campionamento

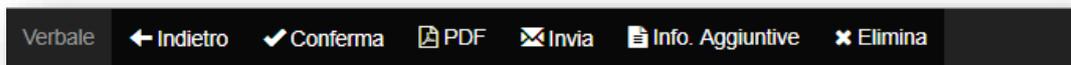

✓ Conferma

Cambia lo stato del verbale di campionamento impostato lo stato a 20 (confermato) , per poter confermare il verbale deve esser stato confermato almeno un campione. In un verbale confermato non sono permesse ulteriori modifiche ad i campioni

Stato: Salvato


Stato: Confermato

Quando il verbale di campionamento viene confermato il sistema genera un PDF del verbale stesso.

Il Verbale di campionamento in formato PDF potrà essere **inviato per e-mail** al cliente e scaricato dal laboratorio di prova all'importazione dei verbali. Il verbale in formato pdf sarà associato in automatico all'accettazione dei campioni generate dai verbali di campionamento.

PDF

Crea il **PDF** del Verbale di Campionamento

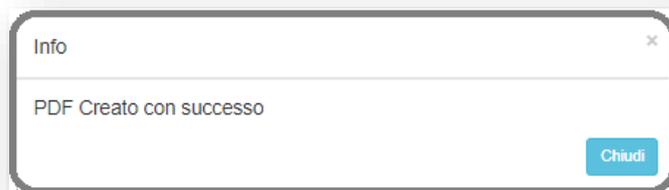

Consente di inviare per Email se generato il verbale di campionamento al cliente, è possibile visualizzare il PDF generato cliccando sull'Allegato dalla maschera.



Cliccando sul pulsante **Info Aggiuntive** possiamo compilare eventuali campi personalizzati del modello associato al contratto da cui deriva il verbale di campionamento che stiamo compilando.

✕ Elimina

Cliccando sul pulsante **Elimina** è possibile eliminare i Verbali Salvati. Il pulsante non sarà visibile sui verbali confermati.

Data e Ora Campionamento

Cliccando sul pulsante con l'orologio è possibile inserire dalla pop-up la data e l'ora del campionamento.

	Riga	Tipo Campione	Frequenza	Qtà	Qtà Conf		
	1	acqua destinata al consumo umano		2	1	+	🕒
	2	acqua destinata al consumo umano		1	0	+	🕒
	3	acqua destinata al consumo umano		1	0	+	🕒
	4	acqua destinata al consumo umano		-	-	-	🕒


Riga:1

Note Campione


Chiudi

Cliccando sul pulsante **Manutenzione Barcodes** saremo indirizzati **nei dettagli del campione**, cliccando sul pulsante a destra **Aumenta Quantità** per ogni clic viene aggiunto un campione confermato per la riga del campione, invece cliccando sul pulsante Note sarà possibile

visualizzare le note impostate sull'applicativo nei dati della riga contratto scheda **Campionamenti Web**.

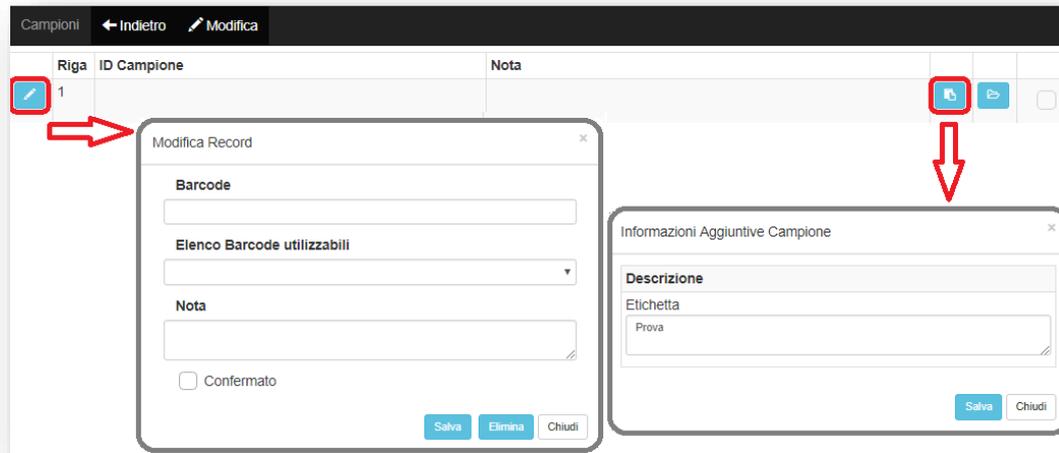

Dentro i dettagli del campione cliccando sul pulsante a sinistra **modifica-inserisci barcode** potremo inserire il barcode che vogliamo utilizzare, e eventualmente eliminare il campione, mentre cliccando sul pulsante a destra **Informazioni aggiuntive campioni** si potranno compilare eventuali **dati aggiuntivi del campione** definiti da utente dentro le impostazioni dei Campionamenti Web in LabPro.

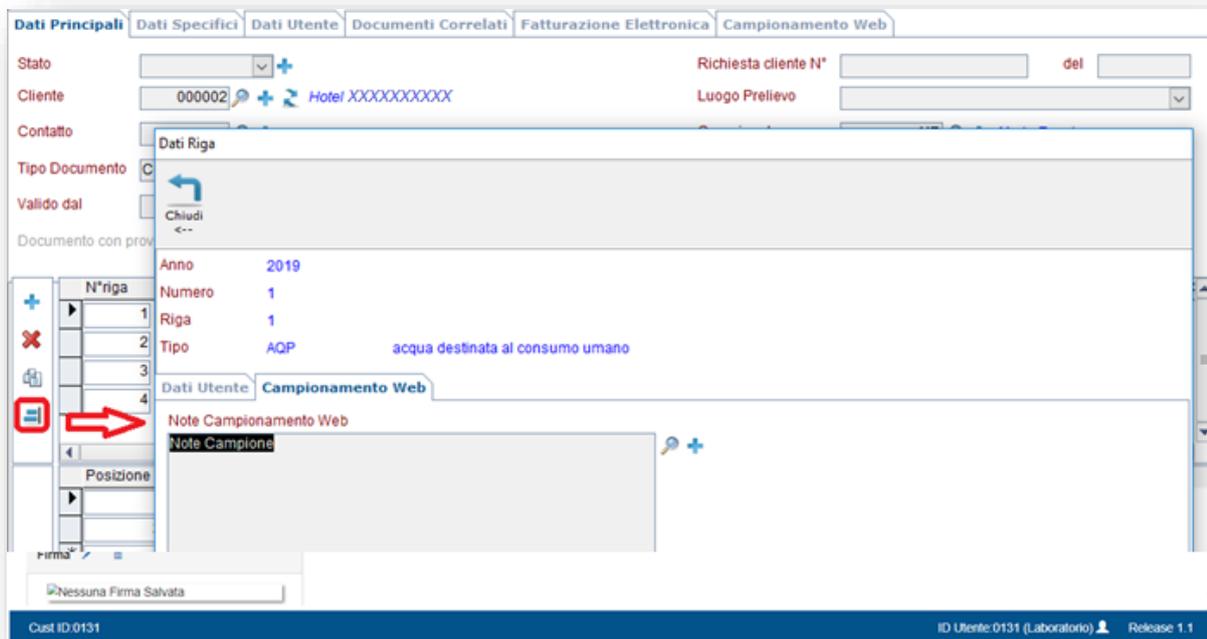

Cliccando sul pulsante **Vai a Risultati Prove** entreremo nelle sottoanalisi del tipo campione e potremo inserire il risultato e confermare il sotto esame.



Cliccando su modifica e spuntando la casella a destra è possibile confermare la riga del tipo campione



Al termine della compilazione del verbale di campionamento il cliente può apporre una **firma grafica** disponendo di un monitor monitor touch screen ed una penna touch (tipicamente da un tablet o da uno smart phone) oppure con la tavoletta grafica od il puntatore del mouse da un PC.

La **firma grafica del campionatore** potrà essere impostata come immagine nella configurazione dell'applicativo.

FAQ – Frequently Asked Questions

- **Come posso eliminare/annullare dei barcode?**

I barcode non possono essere eliminati ma soltanto annullati dal menu "Barcode campionamenti web" di Labpro, cliccando su "Annulla Barcode". I barcode pre-assegnati non possono venire annullati.

Un barcode non pre-assegnato può essere annullato solo se non è ancora stato trasferito su web oppure se è stato trasferito (stato 2) ma non è stato ancora utilizzato dal web, ovvero abbinato ad un campione di un verbale WEB.

- **Devo modificare la ragione sociale o altre informazioni dell'anagrafica di un cliente, come posso aggiornare l'anagrafica sul web?**

Modificando i seguenti campi dell'anagrafica cliente

ragione sociale, indirizzo, città, CAP, provincia, telefono, cellulare, codice fiscale, piva, email si reimpostano da esportare tutti i contratti già esportati NON scaduti intestati al cliente, in modo da aggiornare l'anagrafica su web alla successiva esportazione.

NB "non scaduti" si intende con data fine validità vuota o superiore a oggi.

- **Devo modificare il nominativo o altre informazioni di un contatto, come posso aggiornare l'anagrafica sul web?**

Modificando i seguenti campi dell'anagrafica contatto

nominativo, azienda, indirizzo, città, CAP, provincia, telefono, cellulare, codice fiscale, piva, email si reimpostano da esportare tutti i contratti già esportati NON scaduti intestati al contatto, in modo da aggiornare l'anagrafica su web alla successiva esportazione.

- **Come posso eliminare un contratto dal web?**

Da Labpro, ricercando il contratto dal menu "Contratti" e cliccando sul bottone "Elimina" accanto all'ID verbale di campionamento

ID verbale di campionamento 

verranno eliminati da web il contratto e i campionamenti confermati legati ad esso, ma soltanto se per essi non è stato ancora creato un verbale (ovvero se non sono in stato salvato o confermato).

- **Ho bisogno di modificare/eliminare un verbale già confermato su web. come posso riportarlo in stato "salvato/da confermare"?**

Da Labpro, menu "Importazione campionamenti", selezionare i verbali in stato confermato

Stato verbale  *confermato*

premere "Carica dati", selezionare il verbale confermato da ripristinare e premere il bottone . Il verbale su web è nuovamente in stato salvato/da confermare e può essere modificato o eliminato.

- **Ho importato un verbale web in Labpro per errore, come posso riportarlo in stato "Confermato/Da importaRE"?**

Da Labpro, menu "Importazione campionamenti", selezionare i verbali in stato importato

Stato verbale  *importato*

premere "Carica dati", selezionare il verbale importato e premere il bottone . Il verbale è di nuovo visibile su web in stato confermato, e quindi è di nuovo possibile effettuare una nuova importazione in Labpro.

- **Posso importare un verbale generando una (o più accettazioni) con uno specifico numero accettazione in una specifica data?**

Da Labpro, menu "Importazione campionamenti", selezionare i verbali in stato confermato, premere "Carica dati", posizionarsi sul verbale confermato e premere il bottone .

Nella maschera "Genera accettazioni da singolo verbale" premere "Modifica" per modificare la data di accettazione e inserire i numeri accettazioni specifici. Infine premere salva per generare le accettazioni da verbale.

Tipo Accett. [Crea un'accettazione per campione](#)

Accettazioni da generare					
N	Data accett.	N° accett. (1)	Tipo camp. cod	Tipo campione	N° progr.
1	21/05/2019		ALIM	ALIMENTI	1
2	21/05/2019		ALIM	ALIMENTI	1
3	21/05/2019		ALIM	ALIMENTI	1
4	21/05/2019		T100	TAMPONE SU SUPERFICI PULIT	1
5	21/05/2019		T100	TAMPONE SU SUPERFICI PULIT	1

NB Per le righe con N° Accett. vuoto, il numero accettazione viene assegnato in automatico da Labpro.

- **Come posso modificare un'etichetta del report Verbale di Campionamento Web?**

Da Labpro, menu "Contratti", scheda Campionamenti Web, cliccare sul consueto bottone per la modifica delle etichette accanto al report del verbale

Tipo Doc. Verbale

- **Come posso ristampare il pdf di un verbale di campionamento web una volta importato in labpro? Dove vengono salvati i pdf dei verbali di campionamento web durante l'importazione?**

Durante l'importazione in Labpro, i pdf dei verbali web sono salvati nella cartella degli allegati visibile nel menu "Impostazioni Applicativo"

Cartella Link Allegati Condivisa

Cartella Allegati (valori sostituiti)

Il Pdf può essere riaperto dall'accettazione e cliccando sul link indicato in "Verbale Camp." nella scheda campionamenti correlati

Dati Principali | Dati Aggiuntivi | Dati Utente | **Documenti Correlati**

Anno

N° Doc.

[Contratto](#)

Verbale N. Data

Campionamento WEB

Verbale Web N. del Id Verbale Web

Verbale Camp. [C:\LabProAC\allegativc_M004_119000073.pdf](#)

- **Se in fase di creazione delle accettazioni da verbale web si importano le prove con risultato, che date vengono impostate in data inizio e data fine analisi?**

Per un'analisi con risultati vengono impostate data inizio analisi = data fine analisi = data verbale web.

- **Se elimino un'accettazione generata importando un verbale web, posso importare di nuovo il verbale?**

Eliminando un'accettazione legata ad un verbale web, viene fatta la domanda "Attenzione l'accettazione proviene da un verbale di campionamento web. Riportare il verbale di campionamento in stato confermato (da accettare)?" Rispondendo di sì il verbale web ritorna in stato confermato, è quindi possibile importarlo di nuovo.

- **Dato un N. di verbale web, come posso risalire alle accettazioni a cui è associato?**

Dalla menu "Stampe elenchi accettazioni campioni su contratti" è possibile filtrare le accettazioni report sul N. Verbale

- **Come posso estrarre un riepilogo dei contratti esportati su web?**

Utilizzare la query

Gruppo Tipo Estrazione

Filtrando data esportazione "Non è Vuoto"

- **Posso esportare sul web anche i parametri di un'analisi?**

Per prima cosa occorre cercare l'analisi nel menu "Anagrafica Analisi "

Per esportare su web tutti i parametri dell'analisi, nella scheda "Altri dati" flaggare

Default flag esporta per verbale di camp. WEB sui parametri

E rispondere di sì alla domanda "Impostare flag Esporta per campionamento web su tutti i parametri dell'analisi?".

Per esportare su web solo alcuni dei parametri dell'analisi, posizionarsi sul singolo parametro e flaggare "Esporta per verbale di campionamento web" nella scheda "Dettaglio Parametro"

Esporta per verbale di campionamento WEB

Al salva, vengono reimpostati da esportare su web tutti i contratti già esportati e non scaduti che contengono la prova modificata (similmente alla modifica dell'anagrafica cliente o contatto).

- **Posso non esportare alcune prove sul web?**

Di default tutte le prove di un contratto vengono esportate su web. Per non esportare una prova su web occorre de-flaggare il parametro nella scheda "Altri dati" del menu "Anagrafica Analisi "

Esporta per verbale di campionamento WEB